


酵母を用いた検証(真核生物)

OD600

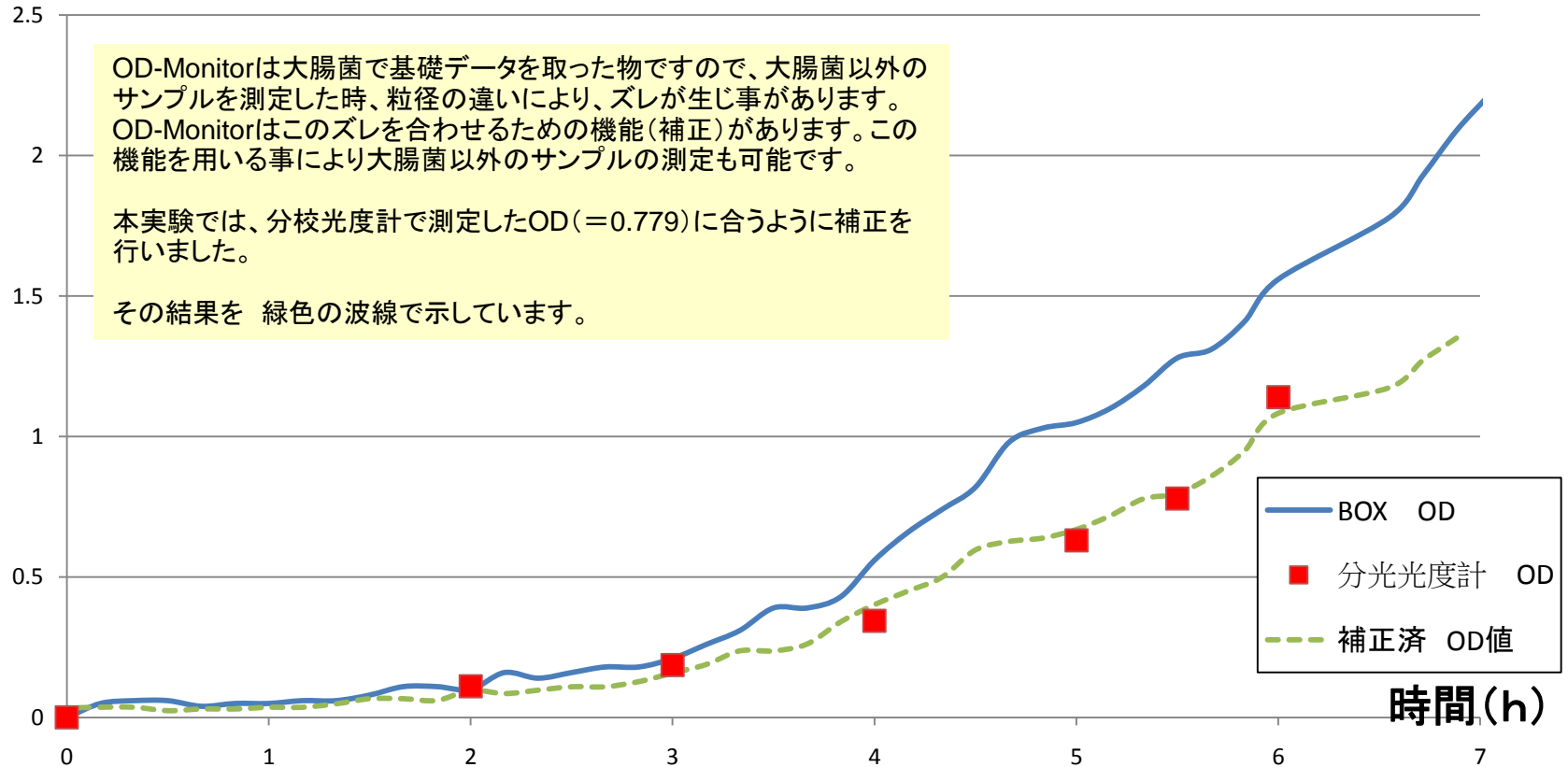


測定条件

温度	植菌OD	フラスコ	振幅	回転数	インターバル	使用装置
30°C	0.05	100ml	25mm	180r/min	10min	BR-23FP

枯草菌 (*B.subtilis*) を用いた検証 (グラム陽性菌)


OD.600

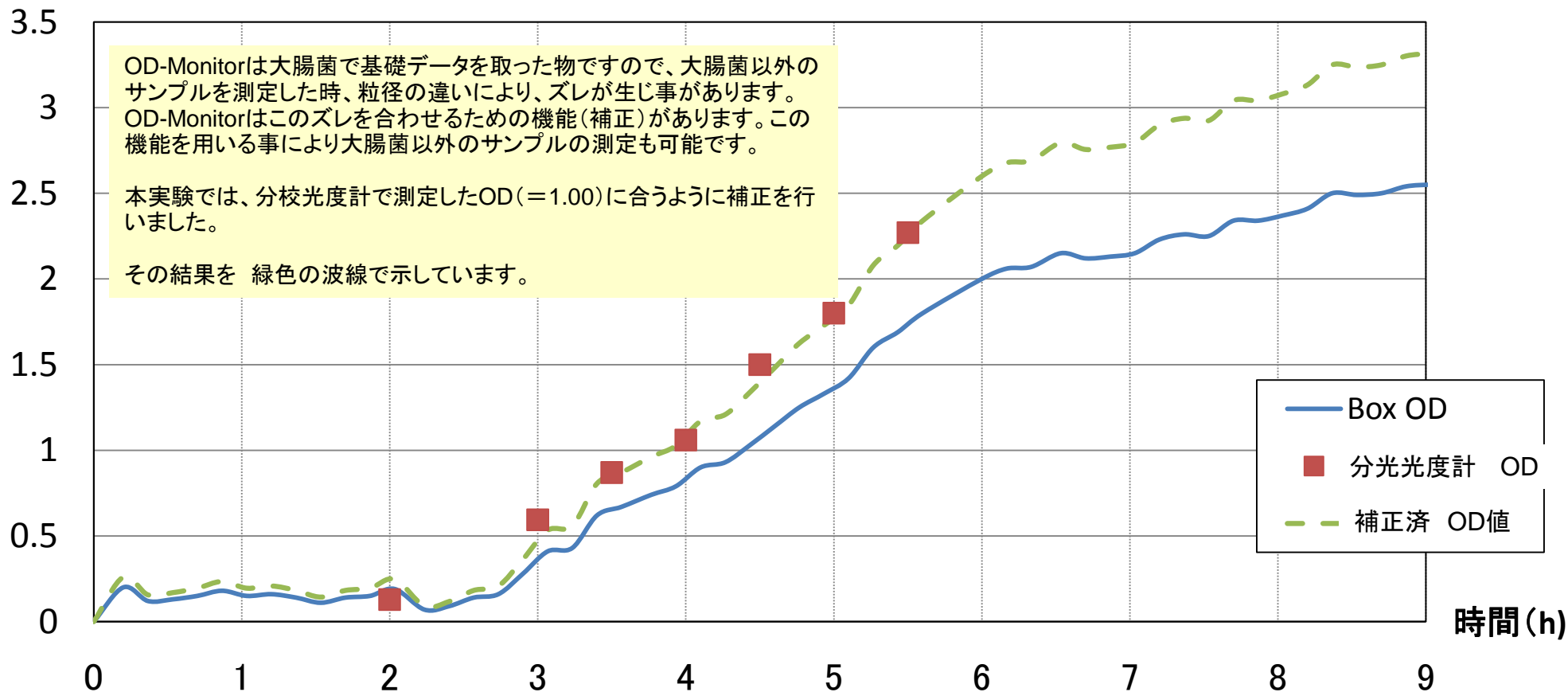

測定条件

温度	植菌OD	フラスコ	振幅	回転数	インターバル	使用装置
37°C	コロニー植菌	300ml	25mm	200r/min	10min	G BR-200

ビフィズス菌 (*B. longum*) 用いた検証

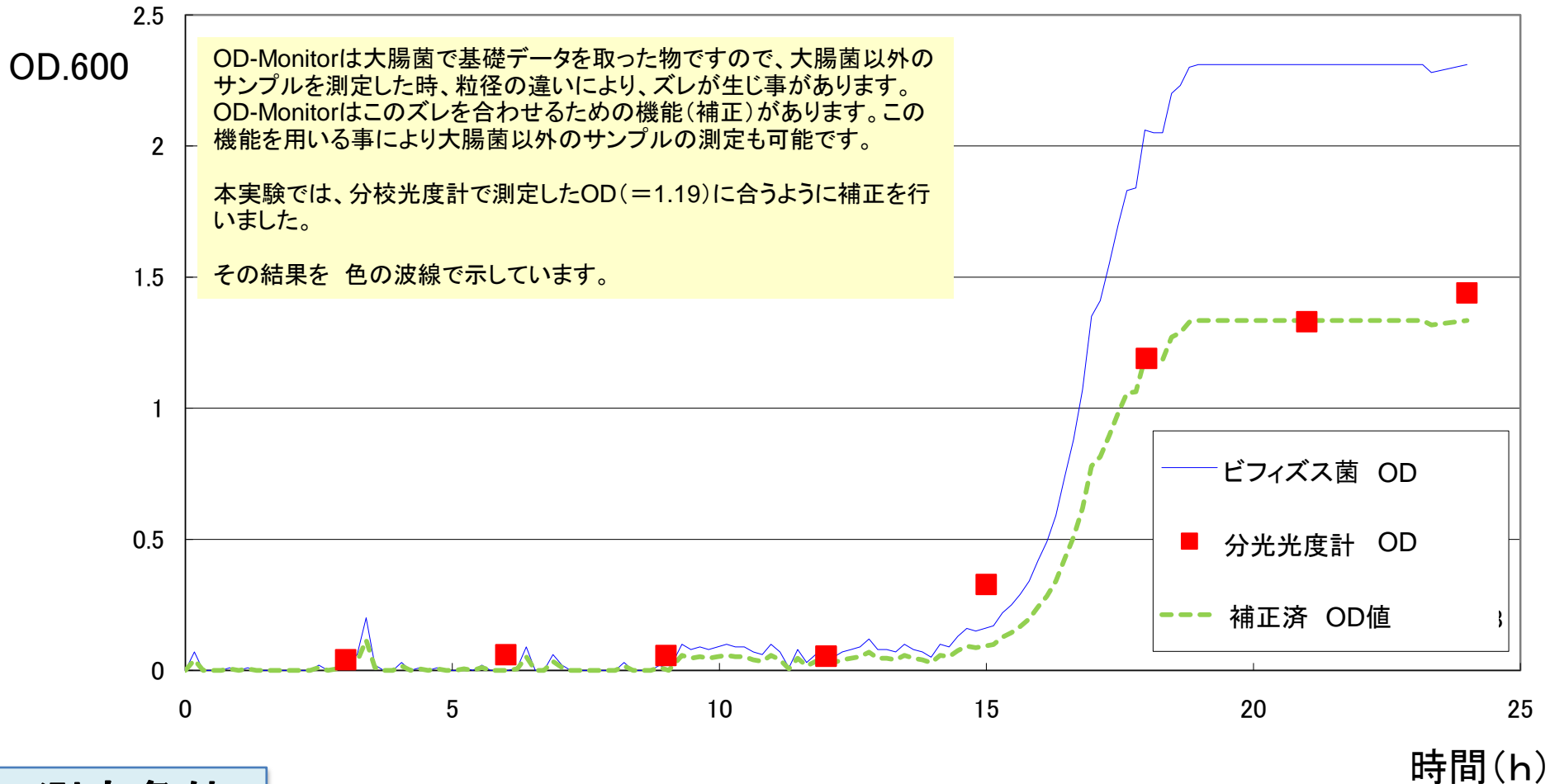

測定条件

温度	植菌OD	フラスコ	振幅	回転数	インターバル	使用装置
37°C	0.01	200ml	25mm	130r/min	10min	BR-40LF